


● MaP1000/2000 シリーズ 消耗品 S-12 b



MaP1978RAD

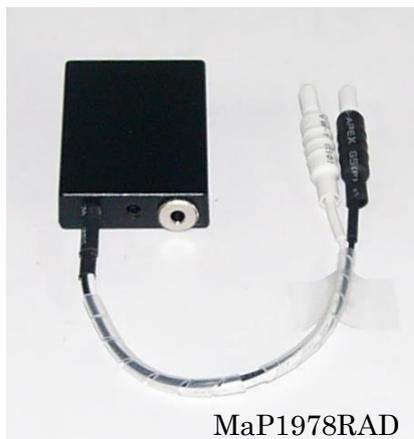

MaP1978RAD(B)

呼吸アダプタ

MaP1978RAD

(3P) (3P-1φ) (B) (PM)

従来からある抵抗変化を利用した呼吸ピックアップを電圧出力とするアダプターです。

5-50(KΩ)前後の抵抗変化を、1~数(mV)の変化に変換します。ポリメイトや汎用の生体アンプに接続することで呼吸曲線の測定ができます。

★動作確認済モデル

呼吸ピックアップ 45360m II A、AP-C021(A)

呼吸センサ SPR102m、SPR103m、AP-C025m

(※呼吸センサは感度が低いため S/N が悪くなります
ご利用の際は事前にご確認ください。)

<仕様>

サイズ W36*H11*D53 (mm)

重量 26 (g)

コード 15(cm)長 DIN プラグ 1.6φ×2個

(B)モデルでは、コードに代わりボタンとなります

電池 CR2032×1個 (3V)

消費電力 6(μW) (使用期間 5年間以上)

<価格>

MaP1978RAD DIN コネクタ 2P ポリメイトII用

MaP1978RAD (3P) DIN コネクタアース付 汎用アンプ用

MaP1978RAD (3P-1φ) 1φ DIN コネクタアース付 汎用アンプ用

MaP1978RAD (B) ボタン式・アース付 ポリアム4用

¥40,000- (税別)

MaP1978RAD (PM) ボタン式アースコード付 ポリメイトミニ用

¥50,000- (税別)

<白：+ 黒：- とする極性の接続で、吸期↑上向、呼期↓下向 となります。>



ポリメイトIIと 45360 との使用例



ポリメイトIIでの測定例
(HIGH, 10, 3s, 15Hz)

※基礎医学研究用機器です。(薬事未承認品に付、臨床検査にはご利用いただけません。)



ニホンサンテック株式会社

〒545-0032 大阪市阿倍野区晴明通9番40号

<http://www.santeku-map.com/>

Tel 06-6652-5984

NST-MaP_HK#180329

Fax 06-7850-3671